

# Začnite ščetkati *med* zobmi



Medzobna ščetka čisti prostor med zobmi, kamor navadna ščetka ne doseže. Vsakodnevna uporaba kot dopolnilo ščetkanju z navadno ščetko pomaga vzdrževati zdrave zob in dlesni.

Široka paleta TePe medzobnih ščetk omogoča izbiro za vsako potrebo. Na voljo so z različnimi dolžinami ročajev, kotov in vrst vlaken. Za lažje razlikovanje velikosti ima vsaka svojo barvo. Za varno uporabo imajo vse ščetke plastificirano žico. Pri izbiri velikosti ščetke vam lahko svetuje vaš zobozdravnik ali zobni higienik.



## Kako ščetkati *med* zobmi ?

1. Ščetko nežno vstavite v medzobni prostor. Za pomoč uporabite ogledalo. Uporabljajte ustrezno velikost ščetke. Le-ta mora drseti v medzobnem prostoru brez uporabe sile.
2. Ščetko nekajkrat nežno premikajte naprej in nazaj.
3. Po uporabi ščetko sperite z vodo. Zamenjajte jo, ko se vlakna izrabijo.



MADE IN SWEDEN



We care for healthy smiles



## TePe – skrbimo za zdrave nasmeh

TePe skrbi za zdrave nasmeh že od leta 1965, ko so v Malmöju na Švedskem pričeli z razvojem in proizvodnjo medzobnih ščetk, zobnih ščetk in drugih izdelkov za ustno higieno. Vsi izdelki TePe so razviti v sodelovanju z zobozdravstvenimi strokovnjaki in so na voljo na več kot 50 tržiščih po celem svetu.

**Za več informacij obiščite [www.tepe.si](http://www.tepe.si)**



Izdelki so na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Zastopa in prodaja:



OFFICIAL DISTRIBUTOR

**GOADRIA**

GO ADRIA d.o.o. | Litijska cesta 45 | SI-1000 Ljubljana | Slovenija  
T: +386 (0)1 521 11 04 | E: [info@go-adria.com](mailto:info@go-adria.com) | [www.go-adria.com](http://www.go-adria.com)

Navodilo za paciente



We care for healthy smiles

## Medzobno čiščenje



© TePe Munhygienprodukt AB. 170SLO.

BR120001TP



## Zob ima *pet* strani. Ali čistite vse ?

Z zobno ščetko čistimo sprednjo, zadnjo in zgornjo (grizno) površino zoba. Pogosto pozabimo, da ima zob še dve površini med zobmi.

Največ ustnih bolezni se prične med zobmi. Z vsakodnevnim medzobnim čiščenjem lahko uspešno preprečimo obolenje dlesni in zobno gnilobo. TePe nudi široko izbiro pripomočkov za učinkovito odstranjevanje oblog iz medzobnih prostorov.

! Ali veste, da navadno ščetkanje očisti samo 60% zoba ?

## Trije enostavni koraki za zdrav nasmeh in svež dah:


1. Dvakrat dnevno ščetkajte zobe s ščetko in zobno kremo s fluorom.
2. Medzobne prostore čistite z medzobno ščetko, nitko ali zobotrebcom.
3. S strgalom za jezik odstranite bakterije z jezika.



### TePe medzobne ščetke

TePe Original ščetke so na voljo v devetih velikostih, kar ustreza vsem velikostim medzobnega prostora. Za lažje razlikovanje ima vsaka velikost svojo barvo. Za varno uporabo je žica na vseh ščetkah plastificirana. Praktični ročaj in kvalitetna vlakna omogočajo učinkovito čiščenje.

Na voljo je tudi paleta posebno mehkih ščetk Extra soft.

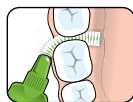



Za lažji dostop do medzobnih prostorov zadnjih zob rahlo ukrijte ščetko. Ukrivljene ščetke ne ravnajte. Za ščetkanje med sprednjimi zobmi uporabite drugo ravno ščetko.

Plastični pokrovček lahko uporabite kot higiensko zaščito in podaljšek ročaja.



### TePe Angle™ – ukrivljena medzobna ščetka

Za boljši dostop ščetke do vseh medzobnih prostorov je ročaj ukrivljen. Namenjena je za čiščenje v zadnjem delu in z notranje strani ust. Dolg sploščen ročaj nudi ergonomski prijem in enostavno uporabo. Na voljo je v šestih velikostih in plastificirano žico.

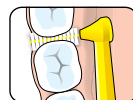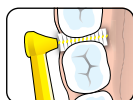

Čiščenje z zunanje strani.

Čiščenje z notranje strani.

## Gel za medzobne ščetke

TePe gel s fluorom nudi dodatno zaščito pred zobno gnilobo med zobmi.

Antibakterijski TePe Gingival gel vsebuje učinkovito kombinacijo klorheksidina in fluora za zaščito dlesni in zob.




## Zobne nitke

Izbirate lahko med tremi izdelki za učinkovito odstranjevanje oblog. TePe Dental Floss je povoskana, široka in ploščata zobna nitka.

TePe Multifloss ima trdi končni del za lažjo vstavev, zadebeljeni in tanki del, kar omogoča čiščenje različno velikih medzobnih prostorov.


TePe Mini Flosser™ je priročno držalo z nitko in posebnim sploščenim delom za varno vstavev v medzobni prostor.

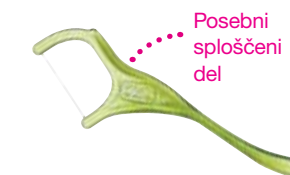

Posebni sploščeni del

## Zobotrebci

Leseni zobotrebci TePe imajo trikotno obliko, ki se prilega naravni obliki medzobnega prostora. Na voljo so v treh velikostih, z ali brez fluora.

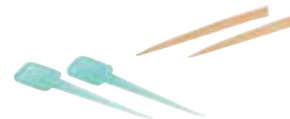

Zelo tanek plastični zobotrebec je primeren za ozke medzobne prostore. Rahlo strukturirana površina omogoča učinkovitejše čiščenje.

## TePe PlaqSearch™

S tableto za odkrivanje zobnih oblog lahko preverite učinkovitost ščetkanja zob. PlaqSearch vam obarva nove (rdeče) in stare(modro) zobne obloge.

